


ScalpelCric


Konikotomia chirurgiczna z użyciem skalpela




ScalpelCric firmy VBM to zestaw chirurgiczny do konikotomii techniką skalpelową: nakłuj-przekręć-bougie-intubacja. ScalpelCric ułatwia stosowanie techniki chirurgicznej. Narzędzia w specjalnym opakowaniu są umieszczone w kolejności użycia. Zmniejsza to ryzyko pomyłki podczas zastosowania w krytycznym momencie procedury.

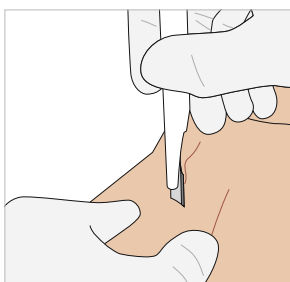


1. Nakłuj

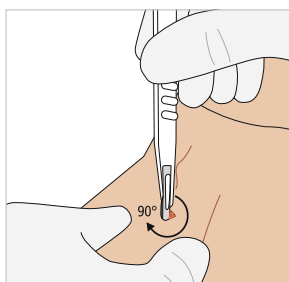

2. Przekręć

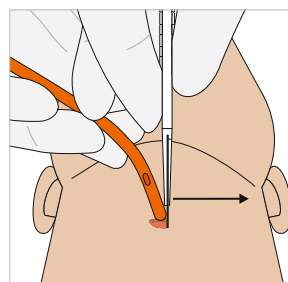

3. Wprowadź

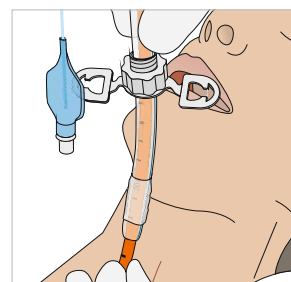

4. Zaintubuj

Informacje
o zamawianiu

ScalpelCric / jednorazowy, sterylny

REF	Opakowanie
30-08-447-1	1

Zestaw zawiera:

- 1 skalpel # 10
- 2 prowadnica 14 Fr
- 3 rurka trecheostomijna 6.0 mm z mankietem
- 4 rurka przedłużająca
- 5 strzykawka 10 ml
- 6 tasiemka mocująca



Rozmiar opakowania: 24 cm dł. X 13 cm szer. X 4 cm wys.
Po rozłożeniu / obszar sterylny: 56 cm dł. X 39 cm szer.



1 2 3 4 5 6

Informacje
dodatkowe



Zastosowanie (film)



Broszura



Ulotka

/ Surgicric II + III



Surgicric to chirurgiczny zestaw do konikotomii mający na celu utrzymanie wentylacji w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych.

Surgicric II stosowany do klasycznej konikotomii chirurgicznej.

Surgicric III stosowany do konikotomii techniką Seldingera.

Unikalny system pakowania narzędzi zapewnia użytkownikowi:

- przejrzysty przegląd wszystkich komponentów
- sterylną aplikację w każdym środowisku
- małe opakowanie, idealnie nadaje się do toreb ratunkowych

Surgicric posiada specjalne połączenie rurki i rozszerzacza, wyposażony w mechanizm blokujący i miękką końcówkę zwiększającą bezpieczeństwo i zmniejszającą ryzyko obrażeń u pacjenta.

Właściwości



Miękka końcówka

Atraumatyczna końcówka



Mechanizm blokujący



Bezpieczeństwo pacjenta



Indywidualna regulacja

Surgicric II

Konikotomia chirurgiczna metodą klasyczną



1 2 3 4 5 6 7 8

Surgicric II / jednorazowy, sterylny

REF	Ilość w opakowaniu
30-08-117-1	1

Informacje
o zamawianiu

Zestaw zawiera:

- 1 skalpel # 11
- 2 strzykawka 10 ml
- 3 rurka tracheostomijna 6.0 mm z mankietem i rozszerzaczem
- 4 tasiemka mocująca
- 5 rurka przedłużająca
- 6 hak
- 7 nożyczki
- 8 wziernik



Rozmiar opakowania: 24 cm dł. 13 cm szer. X 4 cm wys.
Po rozłożeniu / obszar sterylny: 56 cm dł. X 39 cm szer.

Surgicric III

Konikotomia chirurgiczna metodą Seldingera



1 2 3 4 5 6 7 8

Surgicric III / jednorazowy, sterylny

REF	Ilość w opakowaniu
30-08-227-1	1

Informacje
o zamawianiu

Zestaw zawiera:

- 1 skalpel # 11
- 2 strzykawka 10 ml
- 3 rurka tracheostomijna 6.0 mm z mankietem i rozszerzacz
- 4 tasiemka mocująca rurkę
- 5 rura przedłużająca
- 6 tasiemka do igły wprowadzającej
- 7 igła wprowadzająca
- 8 prowadnik



Rozmiar opakowania: 24 cm dł. X 13 cm szer. X 4 cm wys.
Po rozłożeniu / obszar sterylny: 56 cm dł. X 39 cm szer.

Informacje
dodatkowe



Zastosowanie (film)
Surgicric II



Zastosowanie (film)
Surgicric III