

Dlaczego warto wybrać Haemoband Plus

KORZYŚCI DLA KLINIKI:

- ☞ Ustalenia cenowe dostosowane do indywidualnych potrzeb
- ☞ Przewaga nad konkurencją dzięki unikalnym funkcjom naszego produktu

KORZYŚCI DLA LEKARZA

- ☞ Funkcje urządzenia opracowane specjalnie tak, aby maksymalnie uprościć użytkowanie
- ☞ Funkcja dual-action umożliwia przeprowadzenie całego zabiegu tylko przez jednego użytkownika.

KORZYŚCI DLA PACJENTA

- ☞ Zmniejszenie liczby wizyt – możliwe wyleczenie nawet 3 hemoroidów w trakcie jednego zabiegu
- ☞ Minimalizacja czasu trwania zabiegu i leczenia po zabiegu


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat **Ligatora Haemoband Plus** prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem w Polsce:

EUMed sp. z o.o
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
tel.: +48 22 879 69 20
e-mail: info@eumed.pl
www.eumed.pl


Producent:
Haemoband Surgical
t: +44 (0)28 9073 7281
F: +44(0)28 9073 7282
info@haemobandsurgical.com www.haemobandsurgical.com



Ponieważ **Haemoband** został zaprojektowany przez chirurgów i dla chirurgów, zdecydowaliśmy, że nadszedł już czas, aby zebrać opinie specjalistów, którzy używają ligatora **Haemoband**. Ich uwagi umożliwiły **wprowadzenie wielu ulepszeń**, które umożliwiają jeszcze lepsze rezultaty kliniczne. To dzięki zaangażowaniu wspomnianych specjalistów powstał ligator **Haemoband PLUS**



Ligator Haemoband to wspólny wynalazek Essama Ghareeba i Colina Fostera. Kombinacja wiedzy Essama Ghareeba jako chirurga – proktologa oraz ogromnego doświadczenia Colina Fostera na światowym rynku medycznym zaowocowała w 2005 r. wprowadzeniem na rynek pierwszego wstępnie załadowanego, jednorazowego multi-ligatora hemoroidalnego z funkcją dual-action. Urządzenie to od tamtego czasu odniosło ogromny sukces.

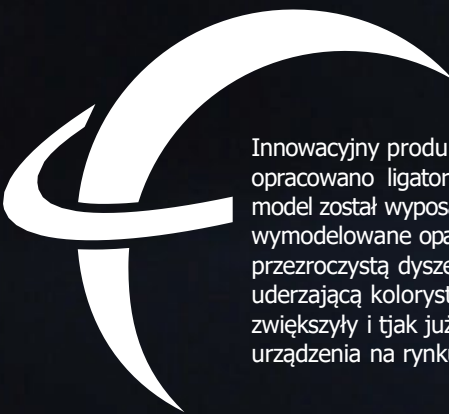

Innowacyjny produkt nadal ewoluował, w 2015 r. opracowano ligator "Haemoband Plus". Nowy model został wyposażony w indywidualnie wymodelowane opaski, prowadnicę wyzwalacza i przezroczystą dyszę, oraz wzbogacony nową, uderzającą kolorystyką. Te nowe cechy jeszcze zwiększyły i tjak już bardzo dużą popularność urządzenia na rynku medyczny.

przeźroczysta
dysza
zapewniająca
lepszą
widoczność

smukła sonda
120 mm


Wstępnie załadowany
czterema zielonymi,
indywidualnie ukształtowanymi
opaskami. Głęboka dysza
zapewnia optymalną moc
ssania, co umożliwia
dokładniejsze opaskowanie
hemoroidu.

Nowy model został wyposażony w:

- ☛ **Wymodelowane opaski GREEN**
zostały one ukształtowane indywidualnie, a nie
wyprodukowane masowo, co oznacza, że są dokładnie
dostosowane do potrzeb pacjenta
- ☛ **Mechanizm stopniujący spustu**
Spust jest zaopatrzony w mechanizm stopniujący,
który prowadzi użytkownika przez każdy kolejny
etap zabiegu
- ☛ **Przeźroczysta dysza**
przejrzystość nowej końcówki zapewnia
maksymalną widoczność podczas całego
zabiegu

Innowacyjna, wielofunkcyjna rękojeść
umożliwia jednoczesną kontrolę ssania,
zwalnianie i przeładowywanie opasek.
Nowy mechanizm stopniujący spustu
prowadzi użytkownika przez każdy etap
zabiegu.


JAK UŻYWAĆ:

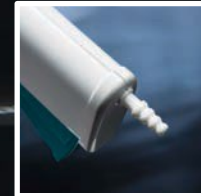


krok 1 - podłącz ssanie za pomocą uniwersalnego aplikatora znajdującego się w dolnej części uchwytu



krok 2- Naciśnij spust do pierwszej zaznaczonej linii, aby włączyć ssanie - spowoduje to zassanie operowanej tkanki do dyszy.

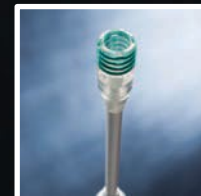

krok 3 - Po zabezpieczeniu tkanki należy nacisnąć spust do pozycji końcowej - spowoduje to umieszczenie opaski na docelowym hemoroidzie.

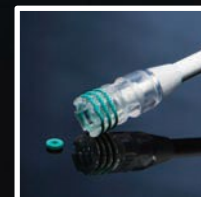

krok 4 - Uwolnij! Po całkowitym naciśnięciu wyzwalacza automatycznie zostanie załadowana nowa opaska, gotowa do założenia na następny hemoroid.

Kluczowe korzyści:

Większa wydajność kliniczna

Haemoband jest bardzo wydajny klinicznie. Jego wielofunkcyjna rękojeść sprawia, że do kontroli ssania, zwalniania opasek i ich przeładowywania potrzebna jest tylko jedna ręka. Dzięki temu lekarz przeprowadzający zabieg drugą ręką może trzymać proktoskop i cały zabieg przeprowadzić samodzielnie. Specjalny kształt opaski Haemoband pozwala również na znacznie dokładniejsze założenie opasek, co ogranicza potrzebę dodatkowych procedur.

Łatwiej i szybciej

Pistolet jest wstępnie załadowany, czysty, gotowy do użytku i można go używać jedną ręką, czas trwania typowego zabiegu ligacji hemoroidów można skrócić z 20 minut do 2-4 minut w przypadku opaskowania do 3 hemoroidów. To nie tylko znacznie poprawia komfort pacjenta, ale także jego eliminuje ryzyko zakażenia krzyżowego.

Gotowy do użycia

Pistolet Haemoband jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z hermetycznego, czystego opakowania. Nie posiada także żadnych dodatkowych akcesoriów, mogących grozić zagubieniem lub wymagających dodatkowej obsługi. Jedyne niezbędne dodatkowe wyposażenie to wyposażenie to proktoskop i standardowe ssanie szpitalne.

Efektywność kosztowa

haemoband jest jednym z najbardziej ekonomicznych multi-ligatorów na rynku. jego jednorazowość oznacza, że nie ma potrzeby stosowania sprzętu do sterylizacji ani inwestowania w kosztowne narzędzia stałe.