




- Biokompatybilny - wykonany z całkowicie naturalnych polimerów chitosanu NOCC
- Minimalizuje krwawienie i obrzęk po zabiegu
- Łatwo dopasowuje się do anatomii nosa
- Łatwiejsze zakładanie, nie ogranicza pola widzenia
- Nie wymaga specjalnego przechowywania w chłodnym miejscu

PosiSep® X jest wskazany do stosowania jako opatrunek hemostatyczny / płytka wewnątrznosowa mający na celu zminimalizowanie krwawienia i obrzęku oraz zapobieganie zrostom między przegrodą nosową a jamą nosową.

PosiSep® X zawiera opatentowane polimery chitosanu NOCC tworzące wygodną dla pacjenta gąbkę, która jest umieszczana w jamie nosowej po operacji lub urazie. Po nawodnieniu PosiSep® X natychmiast się rozszerza, wypełniając przestrzeń między tkankami błony śluzowej i zapobiega zrostom pooperacyjnym. Dalsze nawadnianie powoduje fragmentację produktu, co korzystnie wpływa na tolerancję i komfort pacjenta. Typowy czas rozpuszczania i eliminacji opatrunku wynosi około 5-10 dni.

- Rozpada się pod wpływem delikatnej irygacji
- Łatwy w stosowaniu - nie wymaga mieszania ani dodatkowego czasu na przygotowanie.
- Szeroko zbadane i udokumentowane właściwości antyadhezyjne opatentowanej substancji NOCC (N,O-karboksymetylochitosan)

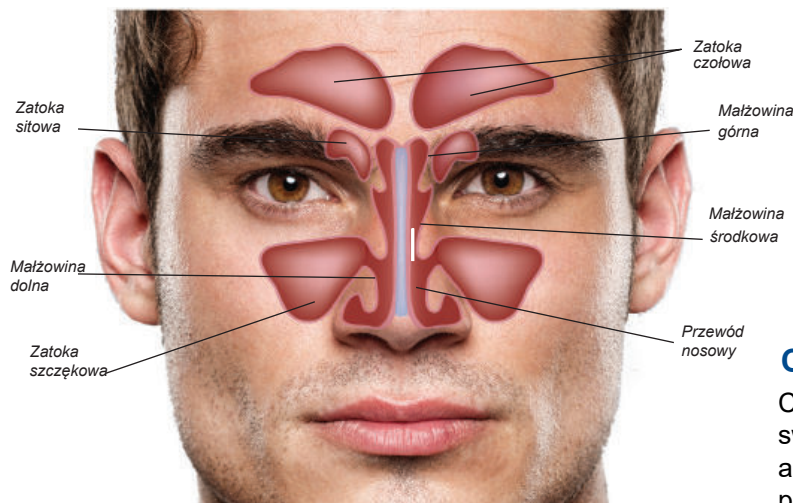

\*rycina nie odzwierciedla skali

Smukła i gładka gąbka PosiSep® X wprowadzana do jamy nosowej, gdzie po nawodnieniu zaczyna się szybko rozszerzać. PosiSep® X może być cięty na mniejsze części celem optymalnego dopasowania.

### Przed nawodnieniem

### Po nawodnieniu



Po nawodnieniu PosiSep X rozszerza się, wypełniając przestrzeń jamy nosowej, co zapobiega powstawaniu zrostów pooperacyjnych.

### Czym jest NOCC?

Chitosan jest szeroko stosowany w leczeniu ran ze względu na swoje właściwości biomedyczne. Jest wytwarzany z chityny - aminopolisacharydu otrzymywanego ze sproszkowanych pancerzy skorupiaków. NOCC (NO-karboksymetylochitosan) jest opatentowanym związkiem chemicznym pozyskiwanym z chitosanu. NOCC posiada unikalne właściwości, które sprawiają, że jest przydatny do zastosowań medycznych.

CHITOSAN TECHNOLOGY

**INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH** PosiSep® X jest dostępny w pięciu rozmiarach. Patrz informacje dotyczące zamawiania poniżej:

#### Nr kat.: Opis:

9215644	PosiSep® XHemostat Opatrunek/płytkę nosowa	1,3cmx3,8cm
9215654	PosiSep® XHemostat Opatrunek/płytkę nosowa	1,5cmx5,1cm
9215664	PosiSep® XHemostat Opatrunek/płytkę nosowa	1,3cmx3,8cm
9215674	PosiSep® XHemostat Opatrunek/płytkę nosowa	1,5cmx5,1cm
9215686	PosiSep® XHemostat Opatrunek/płytkę nosowa	1,8cmx8,0cm

#### Opakowanie:

8 szt.	PosiSep® X jest pakowany po osiem (8) sterylnych opakowań do
8 szt.	jednorazowego użytku zapakowanych w karton. Jedno (1) sterylne
8 szt.	opakowanie zawiera jeden (1) opatrunek / płytke hemostatyczną.
8 szt.	PosiSep® X jest sterylizowany przez napromieniowanie
8 szt.	promieniami gamma.

PosiSep® jest przeciwwskazany u pacjentów, u których stwierdzono alergię na skorupiaki. Szczegółowe informacje dotyczące wskazań do stosowania, ostrzeżeń i środków ostrożności znajdują się w instrukcji użytkownika.

Dystrybucja w Polsce:

EUMed sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, tel. 22 879 69 20, [www.eumed.pl](http://www.eumed.pl), [info@eumed.pl](mailto:info@eumed.pl)